打开/关闭电源 无定时加热(<mark>0H</mark>默认12小时) 接通电源后显示为 --

2. 定时按键: 设定加热时间

OH = 无定时加热 (默认12小时自动关闭电源)

1H = 定时1小时加热 **4H** = 定时4小时加热 **8H** = 定时8小时加热

3. 温度显示屏:

显示设定的温度和当前的温度

4. 电源显示灯:

当此灯亮起时,表示已接通电源

5. 温度显示灯:

当此灯亮起时,表示正在加热

6. 温度调节旋钮:

调节加热温度

Temperature 2-5 HEATING -1/4/8/12H **ISO** CE POWER -TEMP. Controller

打开/关闭电源

关闭电源显示 --, 表示所有功能都不可使用 打开电源显示 --, 表示所有功能都可使用

2. 定时按键: 5 种选项

OH = 无定时加热(默认12小时自动关闭电源)/ 1H = 定时1小时加热

4H = 定时4小时加热 / 8H = 定时8小时加热 / 停止加热

3. 程序按键: 3 种选项

1P = 光子开启30分钟

2P = 光子循环运行8个程序

(一个程序等于光子开启30分钟, 关闭30分钟)

光子关闭

4. 温度和功能显示屏:

显示设定的温度和当前的温度

5. 电源显示灯:


当此灯亮起时,表示已接通电源

- 6. 光子显示灯: 当此灯亮起时, 表示光子已经开始工作
- 7. 程序循环显示灯:

当此灯亮起时,表示光子正在自动运行程序

- 8. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示正在加热
- 9. 温度调节旋钮:

调节加热温度

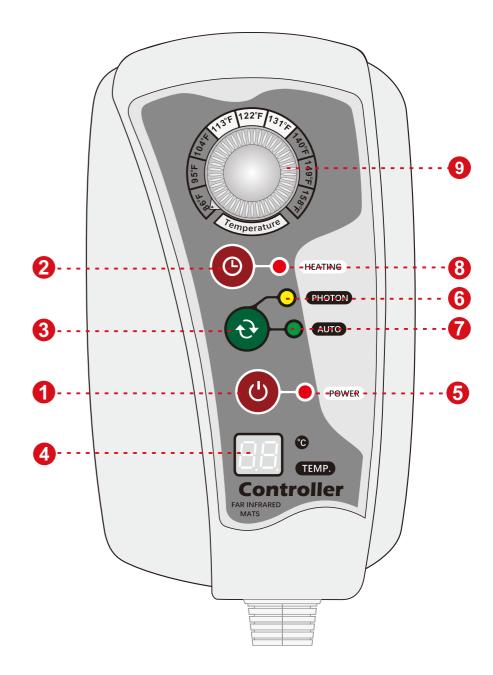

打开/关闭电源

关闭电源显示 --, 表示所有功能都不可使用 打开电源显示 --, 表示所有功能都可使用

2. 定时按键: 5 种选项

OH = 无定时加热(默认12小时自动关闭电源)/ 1H = 定时1小时加热

4H = 定时4小时加热 / 8H = 定时8小时加热 / 停止加热

3. 程序按键: 3 种选项

1P = 超长波运行15分钟

2P = 超长波循环运行8个程序

(一个循环程序等于超长波运行15分钟, 关闭45分钟)

超长波停止运行

4. 温度和功能显示屏:

显示设定的温度和当前的温度

5. 电源显示灯:


当此灯亮起时,表示已接通电源

- 6. 光子显示灯: 当此灯亮起时, 表示光子已经开始工作
- 7. 程序循环显示灯:

当此灯亮起时,表示光子正在自动运行程序

- 8. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示正在加热
- 9. 温度调节旋钮:

调节加热温度

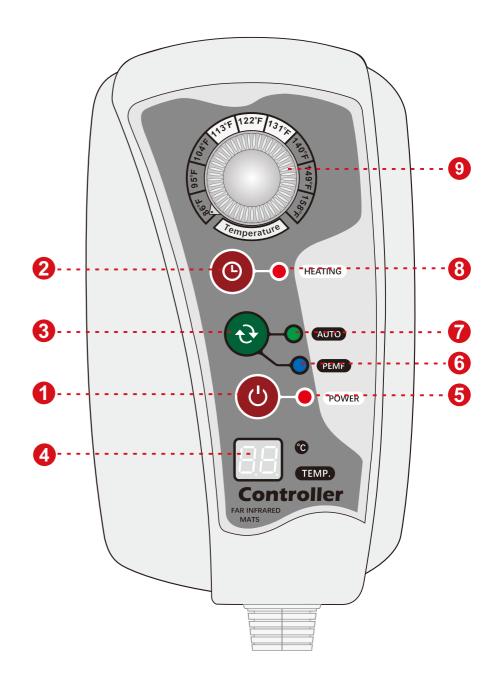

为提高产品质量,手册中的产品规格可能随时被更改,恕不另行通知

打开/关闭电源

关闭电源显示 --, 表示所有功能都不可使用 打开电源显示 --, 表示所有功能都可使用

2. 定时按键: 5 种选项

OH = 无定时加热(默认12小时自动关闭电源) /**1H**= 定时1小时加热

4H = 定时4小时加热 / 8H = 定时8小时加热 / 停止加热

3. 程序按键: 5 种选项

1P = 光子开启30分钟, 超长波运行15分钟

2P = 光子和超长波循环运行8个程序

(一个循环程序等于光子开启30分钟,关闭30分钟;超长波运行15分钟,关闭45分钟)

3P = 只有光子开启30分钟, 超长波停止运行

4P = 只有超长波运行15分钟, 光子关闭

只有超长波运行15分钟, 光子关闭

4. 温度和功能显示屏:

光子和超长波都停止工作。

5. 电源显示灯:

当此灯亮起时,表示已接通电源

6. 超长波显示灯: 当此灯亮起时, 表示超长波正在运行

7. 程序循环显示灯:


当此灯亮起时,表示光子和超长波正在自动运行程序

8. 光子显示灯: 当此灯亮起时, 表示光子已经开始工作

9. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示正在加热


10. 温度调节旋钮:调节加热温度

为提高产品质量,手册中的产品规格可能随时被更改,恕不另行通知

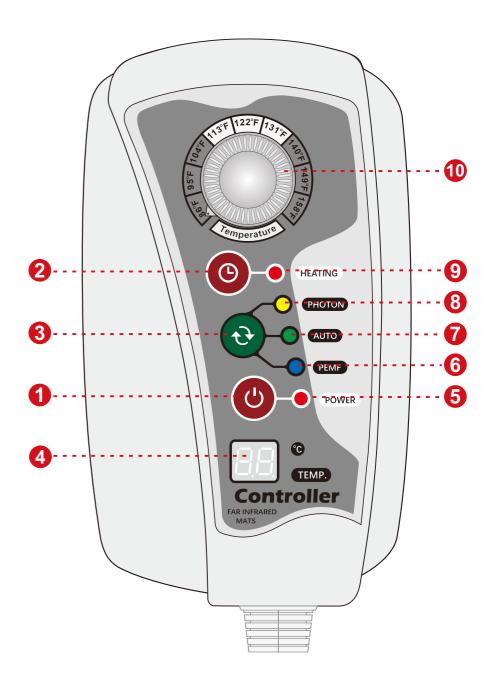



使用前请仔细阅读说明书。在连接电源前请 将产品展开平放在床上或地板上。

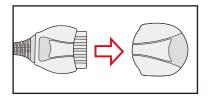


首先将温度控制器与产品的连接器相连接, 然后将电源插头连接到插座上。



按电源键打开电源, 打开加热无定时或者 按定时器按钮设置加热时间。



转动温度调节旋钮、调节至想要的温度。

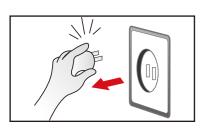

停止使用时,先关闭电源按键,拔掉插头, 然后断开温控器与产品的连接器。




为了安全起见,请在使用本产品时注意查看温度。

使用本产品时请勿在产品上覆盖厚毛毯等物品。



请远离尖锐的物体避免产品被损坏。

请勿用湿手拉扯电源线。可能会导致触电。

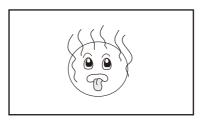


使用前,请确保产品处于干燥的环境。 如果不慎将液体洒在产品上,请在使用前进 行干燥处理。

为了避免烫伤皮肤,请调节至合适温度。



请勿折叠和弄皱产品。

请勿在任何火源,加热设备或易燃物体附近使用本产品。否则可能会引起火灾或触电。

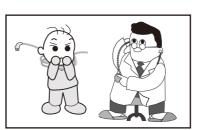

请勿让儿童在产品上或附近玩耍。

如果有任何异常情况请停止使用本产品,并且 与我们联系。如果您有任何医疗问题,请咨询 您的医生。