

**1. 电源按键:**

打开/关闭电源

**2. 定时按键:** 设定加热时间

**0H** = 无定时加热 (默认12小时自动关闭电源)

**1H** = 定时1小时加热

**4H** = 定时4小时加热

**8H** = 定时8小时加热

**3. 温度显示屏:**

显示设定的温度和当前温度

**4. 电源显示灯:**

当此灯亮起, 表示已经接通电源

**5. 温度显示灯:**

当此灯亮起, 表示正在加热

**6. 温度调节旋钮:**

调节加热温度



为提高产品质量, 手册中的产品规格可能随时被更改, 恕不另行通知

### 1. 电源按键:

打开/关闭电源

### 2. 定时按键: 5种选项

**0H** = 无定时加热 (默认12小时自动关闭电源)

**1H** = 定时1小时加热

**4H** = 定时4小时加热

**8H** = 定时8小时加热

停止加热

### 3. 程序循环按键: 3种选项

**1P** = 光子开始30分钟

**2P** = 光子循环运行8个程序

(1个程序=光子开启30分钟, 关闭30分钟)

光子关闭

### 4. 温度和功能显示屏:

显示设定的温度和当前温度

### 5. 电源显示灯:

当此灯亮起时, 表示已经接通电源

### 6. 光子显示灯: 当此灯亮起时, 表示光子已经开始工作


### 7. 程序循环显示灯:

当此灯亮起时, 表示光子正在自动运行程序

### 8. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示已经开始加热

### 9. 温度调节旋钮:

调节加热温度

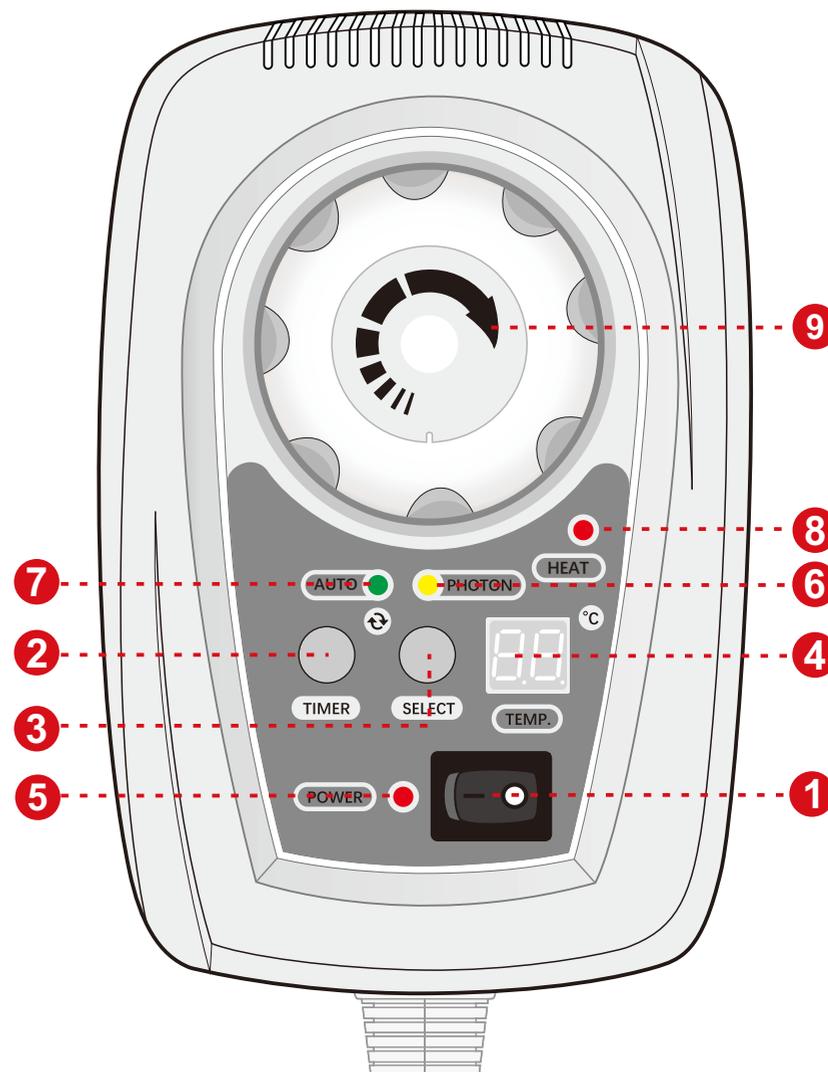

为提高产品质量, 手册中的产品规格可能随时被更改, 恕不另行通知

### 1. 电源按键:

打开/关闭电源

### 2. 定时按键: 5种选项

**0H** = 无定时加热 (默认12小时自动关闭电源)

**1H** = 定时1小时加热

**4H** = 定时4小时加热

**8H** = 定时8小时加热

停止加热

### 3. 程序循环按键: 3种选项

**1P** = 超长波运行15分钟

**2P** = 超长波循环运行8个程序

(1个程序=超长波运行15分钟, 关闭45分钟)

超长波停止运行

### 4. 温度和功能显示屏:

显示设定的温度和当前温度

### 5. 电源显示灯:

当此灯亮起时, 表示已经接通电源

### 6. 超长波显示灯: 当此灯亮起时, 表示超长波已经开始运行


### 7. 程序循环显示灯:

当此灯亮起时, 表示超长波正在自动运行程序

### 8. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示已经开始加热

### 9. 温度调节旋钮:

调节加热温度

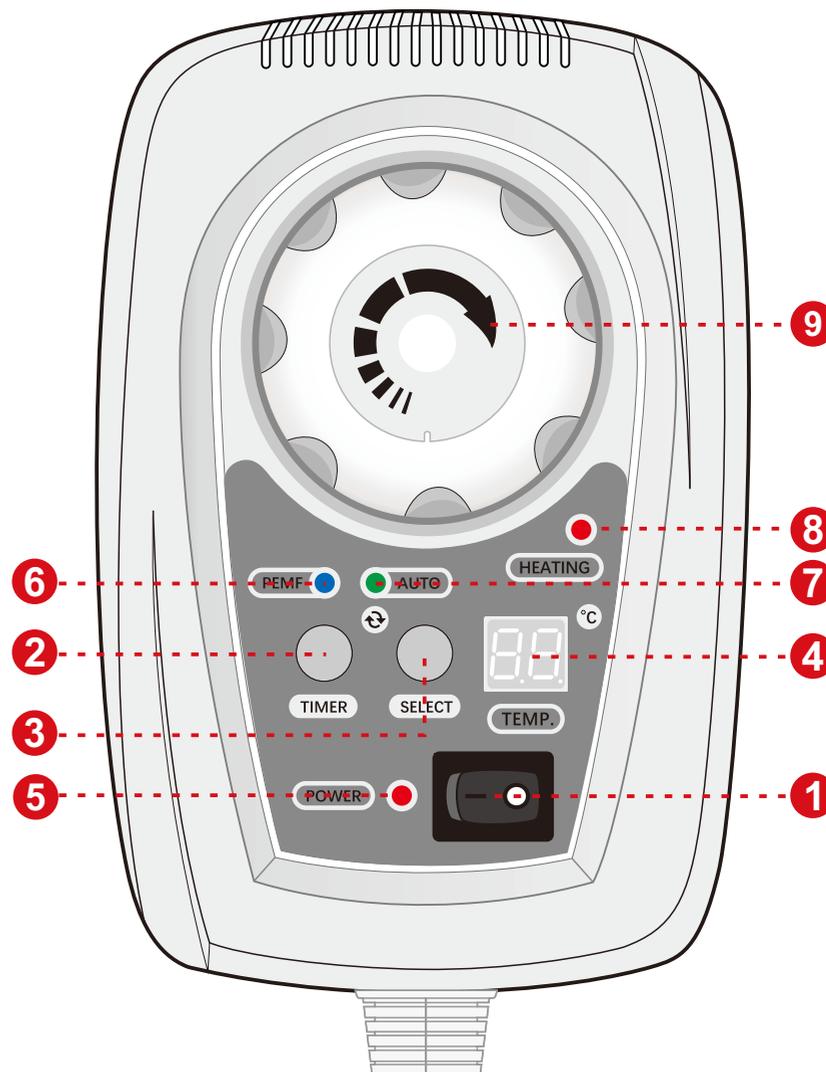

为提高产品质量, 手册中的产品规格可能随时被更改, 恕不另行通知

### 1. 电源按键:

打开/关闭电源

### 2. 定时按键: 5 种选项

**0H** = 无定时加热 (默认12小时自动关闭电源)

**1H** = 定时1小时加热

**4H** = 定时4小时加热

**8H** = 定时8小时加热

停止加热

### 3. 程序按键: 5 种选项

**1P** = 光子开启30分钟, 超长波运行15分钟

**2P** = 光子和超长波循环运行8个程序

(一个循环程序等于光子开启30分钟, 关闭30分钟; 超长波运行15分钟, 关闭45分钟)

**3P** = 只有光子开启30分钟, 超长波停止运行

**4P** = 只有超长波运行15分钟, 光子关闭

光子和超长波都停止工作

### 4. 温度和功能显示屏:

显示设定的温度和当前温度 (30~70°C)

### 5. 电源显示灯:

当此灯亮起时, 表示已经接通电源

### 6. 超长波显示灯: 当此灯亮起时, 表示超长波已经开始运行


### 7. 程序循环显示灯:

当此灯亮起时, 表示超长波正在自动运行程序

### 8. 光子显示灯: 当此灯亮起时, 表示光子已经开始工作

### 9. 温度显示灯: 当此灯亮起时, 表示已经开始加热


### 10. 温度调节旋钮: 调节加热温度

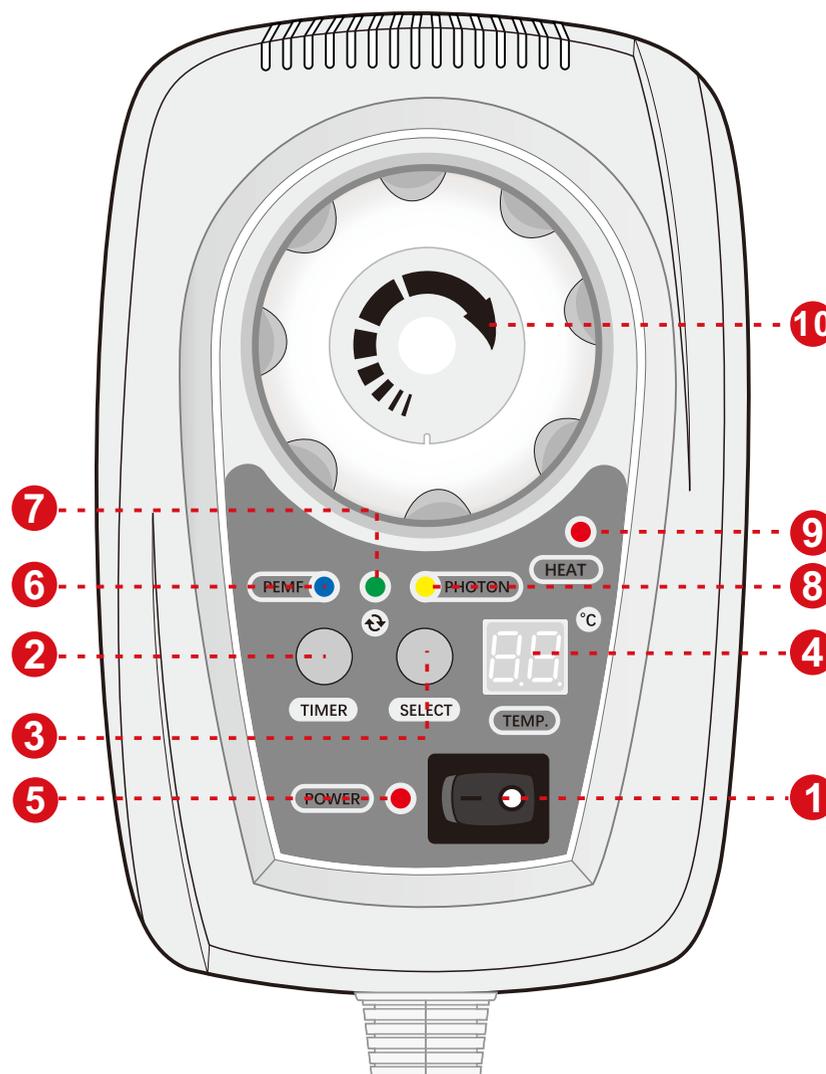


为提高产品质量, 手册中的产品规格可能随时被更改, 恕不另行通知



使用前请仔细阅读说明书。在连接电源前请将产品展开平放在床上或地板上。

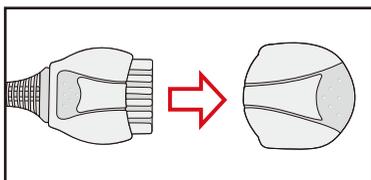


首先将温度控制器与产品的连接器相连接，然后将电源插头连接到插座上。

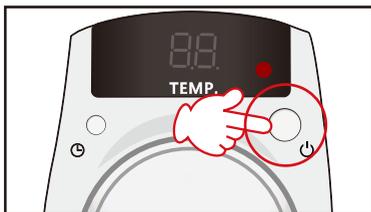


按电源键打开电源，打开加热无定时或者按定时器按钮设置加热时间。



转动温度调节旋钮，调节至想要的温度。

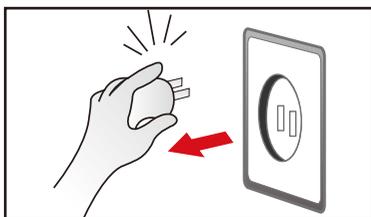

停止使用时，先关闭电源按键，拔掉插头，然后断开温控器与产品的连接器。

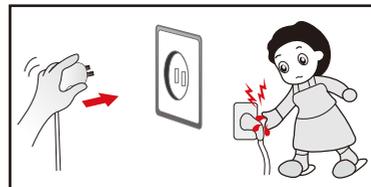


为了安全起见，请在使用本产品时注意查看温度。

使用本产品时请勿在产品上覆盖厚毛毯等物品。




请远离尖锐的物体避免产品被损坏。

请勿用湿手拉扯电源线。可能会导致触电。

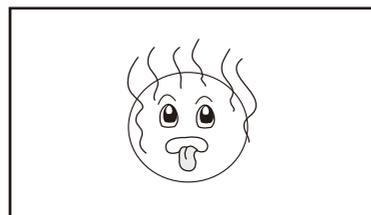


使用前，请确保产品处于干燥的环境。如果不慎将液体洒在产品上，请在使用前进行干燥处理。

为了避免烫伤皮肤，请调节至合适温度。

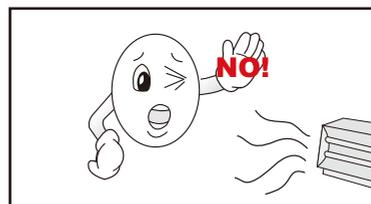

请勿折叠和弄皱产品。

请勿在任何火源，加热设备或易燃物体附近使用本产品。否则可能会引起火灾或触电。

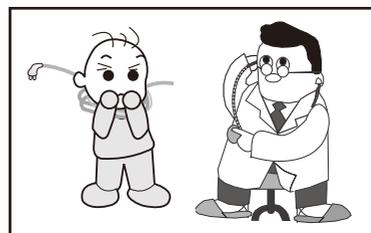

请勿让儿童在产品上或附近玩耍。

如果有任何异常情况请停止使用本产品，并且与我们联系。如果您有任何医疗问题，请咨询您的医生。